

Schrittweise Durchführung



1
Vor- und Nachname sowie das Datum der Probenahme auf das etikettierte Proberöhrchen schreiben.




2
Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.



3
Nach dem Stuhlgang das Proberöhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.




4
Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

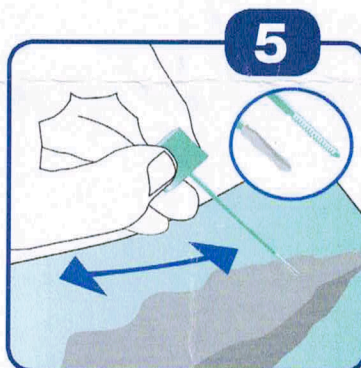


5
Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.



6
Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses somit verschließen. Nach einem hörbaren „Klick“ ist das Proberöhrchen ordentlich verschlossen. Probenahme nicht wiederholen!

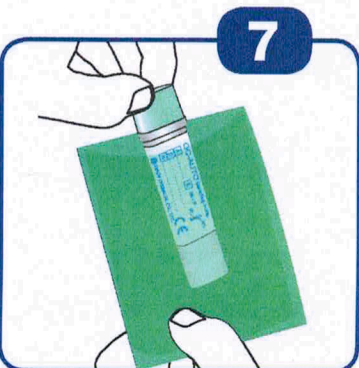

7
Das verschlossene Proberöhrchen kräftig schütteln. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschließen Sie diesen.

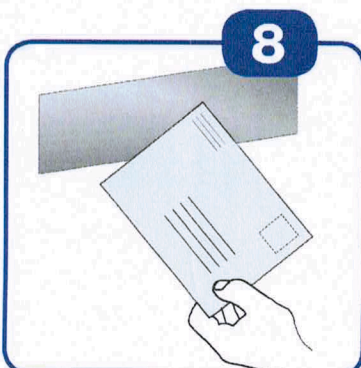

8
Bringen Sie das Proberöhrchen so rasch wie möglich an die ausgebende Stelle zurück; eine schnelle Rückgabe erhöht die Probensicherheit.

V. 2016-04-12

Vertrieb durch / distributed by:

Mast Diagnostica GmbH

Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0
Tel. +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostica.de
www.fit-screening.de



**Mast
Group**

Hersteller:



EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan